

作業報告書

2018 年 12 月 25 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	SOMATOM Definition Flash	作業番号	728200863638 / 12
シリアル番号	73347	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108270	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-CT02	契約区分	契約あり
		報告者	川原 直多可

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>訪問理由/システム状況・現象等 定期点検 第1回 年2回 エックス線管 使用量 A側 202397秒 2018年3月8日使用開始 B側 36149秒 2017年8月15日使用開始 定期交換品: ノイズ除去ブラシ</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検時、キャビネットフィルターの交換作業が実施できませんでした。 本日、キャビネット2台のフィルター交換を実施しました。</p>

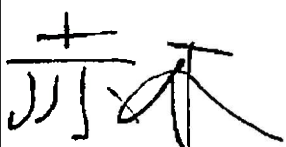
作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/12/25	川原 直多可	71025221	18:00	0.50	0.00	0.50	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10161717 filter-mat	10161717	1	
10161717 filter-mat	10161717	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	赤木 様
	

シーメンスヘルスケア株式会社
 〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2018 年 12 月 18 日

国立大学法人岡山大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	SOMATOM Definition Flash	作業番号	728200863638 / 1
シリアル番号	73347	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108270	作業状況	未完
技術ID番号	732-40018020-CT02	契約区分	契約あり
		報告者	川原 直多可

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>訪問理由/システム状況・現象等 定期点検 第1回 年2回 エックス線管 使用量 A側 202397秒 2018年3月8日使用開始 B側 36149秒 2017年8月15日使用開始 定期交換品: ノイズ除去ブラシ</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>点検報告書項目に従い点検作業を実施しました。 詳細は別紙点検報告書をご参照ください。 ・各種安全確認 ・ガントリー内点検、清掃 ・各種エアフィルター清掃、交換 ・クオリティーチェック ・温湿度データ確認 ・バックアップDVD作成 ・電源OFF/ON ・チェックアップ ・テストスキャン</p> <p>株式会社ダイキンアブライドシステムズにて、チラーの点検を実施いたしました。 こちらも異常ありません。</p> <p>-特記事項- キャビネット用フィルターの入手が間に合わなかった為、別途入手し次第に作業させていただきます。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/12/18	川原 直多可	71025221	18:00	3.00	0.00	3.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10161804 EMC brush	10161804	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認	赤木 様
赤木	

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2018年6月14日

国立大学法人岡山大学病院 様

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	SOMATOM Definition Flash	作業番号	728200816073 / 1
装置シリアル番号	73347	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108270	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018020-CT02	契約区分	契約あり
		報告者	川原 直多可

サービス・作業内容

<p>訪問理由/システム状況・現象等</p> <p>定期点検 第2回 (年2回)</p> <p>X線管使用量 A側 71510scan sec 2018年3月8日使用開始 B側 23556scan sec 2017年8月15日使用開始</p> <p>作業内容</p> <p>点検手順書に従い作業を実施致しました。</p> <p>CTガントリースリップリング清掃及びブラシの予防交換実施。 UPSのバッテリーを予防交換致しました。 今回の点検項目において問題となる箇所はありません。</p> <p>詳細は別途お渡し致します点検報告書をご参照ください。</p> <p>最終動作確認として、日常の一連の動作(システムのオフオン、チェックアップ、テストスキャン、通信テスト)を実施しました。 動作に異常が無いことを確認致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/06/14	川原 直多可	71025221	17:45	5.75	0.00	5.75	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分
10494881 CxT P47 HPT Brushblock	10494881	1		
10431919 IRSmx3_Air filter	10431919	1		
10161804 EMC brush	10161804	1		
10161761 battery pack#for UPS	10161761	1		

お客様ご確認	様

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387