


作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		様		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センタ-内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925	
お客様ID 61158290000-144	受付番号 4980296	作業 EE	区分 2J	保証区分 有償	PJ番号 SR04980296
装置名 MRAD-A80S/B5		設置室 30室		据付日 2017年2月28日	
ご依頼内容 スポット点検作業		作業内容 点検報告書に基づき、点検作業実施			
受付日 2019年10月7日					
作業開始・終了時間					
開始	2019年10月9日17時00分				
終了	2019年10月9日18時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
1.5	1.5	0.75	3.75		
完了					
ユニット MRAD-A80S/B5		製造番号 B5A1712002		作業担当者 矢島、岩井、滝本 他0名	
使用部品					数量
1	以下余白	図番			
2		図番			
3		図番			
4		図番			
5		図番			

ご所属

ご署名

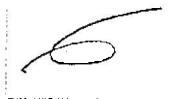

沼田

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意願います。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号 01116124

DST-2000A 点検報告書 (一回目)(1/2)

D. 御得意用(記録)

SR No.

実施日 2019 年 10 月 9 日

御得意名	岡山大学病院	様	システム型式名	MRATF-A05/R5	契約期間	点検者	朱島 漢本 岩井
室名	30 X線撮影室		Ser No.	R5A112102	年 月 日	年 月 日	
			制御装置名	EXC-055/NIP	年 月 日	年 月 日	
			Ser No.	NTR172064	年 月 日	年 月 日	

御得意承認印

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考
天井レール	X線管支持装置 DST-2000A(2Y621-093JA)					制御BOX	リンクスイッチの点検	6.1.4.1(10)	C	✓	
	長手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(1)	C	✓			操作パネルの点検	6.1.4.1(11)	C	✓	
	長手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(2)	C	✓			ヒューズの容量と状態	6.1.6.1(1)	C	✓	
	ガイドローラーの確認	6.1.5.1(3)	C	✓			電源電圧の確認	6.1.6.1(2)	C	✓	
	浮き止めローラーの確認	6.1.5.1(4)	C	✓			各コネクタの確認	6.1.6.1(3)	C	✓	
	長手動用マグネットブレーキの点検	6.1.5.1(5)	C	✓			各端子の接点の確認	6.1.6.1(4)	C	✓	
	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(6)	C	✓			遅延リレーの動作確認	6.1.6.1(5)	C	✓	
	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(7)	C	✓			PC板の清掃	6.1.6.1(6)	C	✓	
	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(8)	C	✓			電源電圧の確認	6.1.7.1(1)	C	✓	
	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(9)	C	✓			緊急停止スイッチの点検	6.1.7.1(2)	C	✓	
本体部	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(10)	C	✓		電動機能 (機能付の場合)	電動機能の点検	6.1.7.1(3)	C	✓	
	横手動ローラー走行面の確認	6.1.5.1(11)	C	✓			PC板の清掃	6.1.7.1(4)	C	✓	
	ガイドローラーの点検	6.1.1.1(2)	C	✓			ACS動作の点検	6.1.8.1(1)	C	✓	
	横手動用マグネットブレーキの点検	6.1.1.1(3)	C	✓			ACS位置表示LEDの点検	6.1.8.1(2)	C	✓	
	横手動用マグネットブレーキの点検	6.1.1.1(4)	C	✓			ACSブロックの点検	6.1.8.1(3)	C	✓	
	懸垂用ワイヤロープの確認	6.1.1.1(5)	C	✓			ACS反射板の点検	6.1.8.1(4)	C	✓	
	コーンブーリの確認	6.1.1.1(6)	C	✓			長手レール回り	6.4.1.2(1)	C	✓	
	上下動用マグネットブレーキの確認	6.1.1.1(7)	C	✓			横手レール回り	6.4.1.2(2)	C	✓	
	ぜんまいばね破断検出器の動作確認	6.1.1.1(8)	C	✓			本体回り	6.4.1.2(3)	C	✓	
	懸垂ワイヤロープの点検	6.1.1.1(9)	C	✓			X線管装置回り	6.4.1.2(4)	C	✓	
支柱	断線検出の動作確認	6.1.1.1(10)	C	✓		電気安全	接地の確認	6.5.1.2(1)	C	✓	
	懸垂ワイヤロープの点検	6.1.1.1(11)	C	✓			外装漏れ電流の測定	6.5.1.2(2)	C	✓	
	等差ワイヤロープの点検	6.1.1.1(12)	C	✓			接地漏れ電流	6.5.1.2(3)	C	✓	
	等差ワイヤロープの点検	6.1.1.1(13)	C	✓			装置および操作ボックスの清掃	6.6.1.2(1)	CL	✓	
	支柱外観の確認	6.1.2.1(1)	C	✓							
	支柱ガタの確認	6.1.2.1(2)	C	✓							
	支柱ワイヤロープの確認	6.1.2.1(3)	C	✓							
	スライダ動作の確認	6.1.3.1(1)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(2)	C	✓							
	ケーブルホルダーの点検	6.1.3.1(3)	C	✓							
サポート部	ローテーション動作の点検	6.1.3.1(4)	C	✓		特記事項	1/1 運用外				
	スライダ動作の点検	6.1.3.1(5)	C	✓			放電防止用コンタクト交換			シコンプレート	1式
	ロック機構の点検	6.1.3.1(6)	C	✓			X線管調整実施				
	ダクトラングの点検	6.1.3.1(7)	C	✓			照射角度: 45004回				
	ローテーション動作の確認	6.1.3.1(8)	C	✓			電源電圧	400V U-V: 395V (U-W: 397V)			
	SID測定スケールの点検	6.1.4.1(1)	C	✓			V-W: 394V				
	横手動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(2)	C	✓			200V U-V: 211V U-W: 212V				
	上下動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(3)	C	✓			V-W: 211V				
	ファンドールフルリーススイッチの確認	6.1.4.1(4)	C	✓			X-ray batt: 3.35V				
	オールフルリーススイッチの確認	6.1.4.1(5)	C	✓							
操作BOX	ローテーション解除スイッチの確認	6.1.4.1(6)	C	✓		個数					
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(7)	C	✓							
	スライダ(支柱軸)の確認	6.1.4.1(8)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(9)	C	✓							

DST-2000A 点検報告書(一回目)(2/2)

御得意承認印

SR No. 実施日 2019年 10月 9日

D. 御得意用(記録)

御得意名	岡山大学病院様	システム型式名	MRAD-AROS/BS
室名	30 X線撮影室	Ser No.	BSA1712002
		制御装置名	KX0-PASS/N7
		Ser No.	N7B1712044

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	
X線可動絞リ BLR-2000A(2Y621-093JA) 絞リ	外観	6.2.1.1(1)	C	✓								
	絞リ回転機構の点検	6.2.1.1(2)	※	✓								
	開度表示機構の点検	6.2.1.1(3)	C	✓								
	羽根開閉確認	6.2.1.1(4)	C	✓								
	開度表示とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(5)	C	✓								
	羽根ダレ寸法の確認	6.2.1.1(6)	C	✓								
	ランプとソケットの確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
	ランプ点灯時間確認	6.2.1.1(8)	C	✓								
	ランプ照度確認	6.2.1.1(9)	C	✓								
	ランプ照射野とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(10)	C	✓								
	照射野ランプの点検	6.2.1.1(11)	C	✓								
	ブッキークライトの点検	6.2.1.1(12)	C	✓								
	感熱遮断器の点検	6.2.1.1(13)	C	✓								
	冷却ファンの動作確認	6.2.1.1(14)	C	✓								
	コネクタ接続の点検	6.2.1.1(15)	※	✓								
	ケーブル配線に点検	6.2.1.1(16)	※	✓								
重要締結部	内部配線材に点検	6.2.1.1(17)	※	✓								
	操作スイッチ、つまみ、表示部の点検	6.2.1.1(18)	C	✓								
	線質フィルタの確認	6.2.1.1(19)	C	✓								
電気安全	X線管装置とX線可動絞リ取付ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
	絞リフランジ取付板固定ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
	接地の確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
清掃	接地抵抗の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
	外装漏れ電流の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
	装置及び操作ボックスの清掃	6.2.1.1(7)	CL	✓								
						特記事項	1は適用外				個数	
						天井走行破断検出動作確認						

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾8 4 3 岡山県総合流通センタ - 内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925			
お客様ID 61158290000-142	受付番号 4971166	作業 EE	区分 2J	保証区分 保守契約	PJ番号 SR04971166
装置名 MRAD-A80S/B5		設置室 40室		据付日 2017年2月28日	
ご依頼内容 スポット点検作業		作業内容 点検報告書に基づく点検作業実施 MRC-04869			
受付日 2019年10月4日					
作業開始・終了時間					
開始	2019年10月9日17時00分				
終了	2019年10月10日19時46分				
時間内	時間外	往復	合計		
0	9	2	11		
完了					
ユニット MRAD-A80S/B5		製造番号 B5A1712004		作業担当者 矢島、岩井、滝本 他0名	
使用部品					数量
1	SILICON PLATE		図番	BSX11-0200E2/12	3
2			図番		
3			図番		
4			図番		
5			図番		

ご所属

ご署名



沼田

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号 01110316

DST-2000A 点検報告書(一回目)(1/2)

SR No.

実施日 2019 年 10 月 9 日

D. 御得意用(記録)

御得意承認印
印

御得意名	様	システム型式名	MDAP-ARMN/B5	契約期間	年月日	点検者	年月日
室名	40 X 線撮影室	Ser No.	BSA172001				
		制御装置名	KXO-80SS/1A7				
		Ser No.	N17R12066				

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考
X線管支持装置 DST-2000A(2Y621-093JA)	天井レール										
	長手動コムストッパの確認	6.1.5.1(1)	C	✓			リンクスイッチの点検	6.1.4.1(10)	C	✓	
	長手動ローラ走行面の確認	6.1.5.1(2)	C	✓			操作パネルの点検	6.1.4.1(11)	C	✓	
	長手動ブレーキの確認	6.1.5.1(3)	C	✓			ヒューズの容量と状態	6.1.6.1(1)	C	✓	
	ガイドローラの確認	6.1.5.1(4)	C	✓			電源電圧の確認	6.1.6.1(2)	C	✓	
	浮き止めローラの確認	6.1.5.1(5)	C	✓			各コネクタの確認	6.1.6.1(3)	C	✓	
	長手動用マグネットブレーキの点検	6.1.5.1(6)	C	✓			各端子の確認	6.1.6.1(4)	C	✓	
	長手動ローラ走行面の確認	6.1.5.1(7)	C	✓			遅延リレーの動作確認	6.1.6.1(5)	C	✓	
	長手動ブレーキの確認	6.1.5.1(8)	C	✓			PC板の清掃	6.1.6.1(6)	C	✓	
	横手動ブレーキの確認	6.1.5.1(9)	C	✓			電源電圧の確認	6.1.7.1(1)	C	✓	
	横手動ブレーキの確認(固定式)の確認	6.1.5.1(10)	C	✓			緊急停止スイッチの点検	6.1.7.1(2)	C	✓	
	横手動ブレーキの確認(固定式)の確認	6.1.5.1(11)	C	✓			運動機能の点検	6.1.7.1(3)	C	✓	
	横手動ブレーキの確認(固定式)の確認	6.1.5.1(12)	C	✓			PC板の清掃	6.1.7.1(4)	C	✓	
	横手動ブレーキの確認(固定式)の確認	6.1.5.1(13)	C	✓			ACS動作の点検	6.1.8.1(1)	C	✓	
本体部	ガイドローラの点検	6.1.1.1(1)	C	✓			ACS位置表示LEDの点検	6.1.8.1(2)	C	✓	
	長手動用マグネットブレーキの点検	6.1.1.1(2)	C	✓			ACSブロックの点検	6.1.8.1(3)	C	✓	
	横手動コムストッパの確認	6.1.1.1(3)	C	✓			ACS反射板の点検	6.1.8.1(4)	C	✓	
	懸垂用ワイヤロープの確認	6.1.1.1(4)	C	✓			最手レール回り	6.4.1.2(1)	C	✓	
	懸垂ワイヤロープの確認	6.1.1.1(5)	C	✓			横手レール回り	6.4.1.2(2)	C	✓	
	上下動用マグネットブレーキの確認	6.1.1.1(6)	C	✓			本体回り	6.4.1.2(3)	C	✓	
	ぜんまいばね破断検出器の動作確認	6.1.1.1(7)	C	✓			X線管装置回り	6.4.1.2(4)	C	✓	
	懸垂ワイヤロープの確認	6.1.1.1(8)	C	✓			接地の確認	6.5.1.2(1)	C	✓	
	懸垂ワイヤロープの確認	6.1.1.1(9)	C	✓			外装漏れ電流の測定	6.5.1.2(2)	C	✓	
	断線検出の動作確認	6.1.1.1(10)	C	✓			接地漏れ電流	6.5.1.2(3)	C	✓	
	等差ワイヤ断線検出器の動作確認	6.1.1.1(11)	C	✓			装置および操作ボックスの清掃	6.6.1.2(1)	QL	✓	
	等差ワイヤ断線検出器の動作確認	6.1.1.1(12)	C	✓							
	等差ワイヤ断線検出器の動作確認	6.1.1.1(13)	C	✓							
	等差ワイヤ断線検出器の動作確認	6.1.1.1(14)	C	✓							
支柱	支柱ワイヤロープの確認	6.1.2.1(1)	C	✓							
	支柱ワイヤロープの確認	6.1.2.1(2)	C	✓							
	支柱ワイヤロープの確認	6.1.2.1(3)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(1)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(2)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(3)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(4)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(5)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(6)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(7)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.3.1(8)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.4.1(1)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.4.1(2)	C	✓							
	スライダの確認	6.1.4.1(3)	C	✓							
サポート部	長手動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(4)	C	✓							
	上下動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(5)	C	✓							
	ワンハンドオールフリースイッチの確認	6.1.4.1(6)	C	✓							
	オールフリースイッチの確認	6.1.4.1(7)	C	✓							
	ローテーション解除スイッチの確認	6.1.4.1(8)	C	✓							
	スライダ(支柱軸)の確認	6.1.4.1(9)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(10)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(11)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(12)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(13)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(14)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(15)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(16)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(17)	C	✓							
操作BOX	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(18)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(19)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(20)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(21)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(22)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(23)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(24)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(25)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(26)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(27)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(28)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(29)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(30)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(31)	C	✓							
	緊急停止スイッチの確認	6.1.4.1(32)	C	✓							

DST-2000A 点検報告書(一回目)(2/2)

御得意承認印

2019

SR No.
実施日 2019 年 10 月 9 日

D. 御得意用(記録)

御得意名	岡山大学病院	様	システム型式名	MRKH-1825/BS
室名	40 X線検査室		Ser No.	BSA1712004
			制御装置名	KX9-BSA17
			Ser No.	N7B1712-066
契約期間		点検者	結果	検査済
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	
線可動線リ BLR-2000A(2V621-093JA) 絞リ	外観	6.2.1.1(1)	C	✓								
	絞リ回転機構の点検	6.2.1.1(2)	※	✓								
	開度表示機構の点検	6.2.1.1(3)	C	✓								
	羽根開閉確認	6.2.1.1(4)	C	✓								
	開度表示とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(5)	C	✓								
	羽根ダレ寸法の確認	6.2.1.1(6)	C	✓								
	ランプとソケットの確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
	ランプ点灯時間確認	6.2.1.1(8)	C	✓								
	ランプ照度確認	6.2.1.1(9)	C	✓								
	ランプ照射野とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(10)	C	✓								
	照射野ランプの点検	6.2.1.1(11)	C	✓								
	ブッキーライトの点検	6.2.1.1(12)	C	✓								
	感熱遮断器の点検	6.2.1.1(13)	C	✓								
	冷却ファンの動作確認	6.2.1.1(14)	C	✓								
	コネクタ接続の点検	6.2.1.1(15)	※	✓								
	ケーブル配線に点検	6.2.1.1(16)	※	✓								
重要締結部	内部配線材に点検	6.2.1.1(17)	※	✓								
	操作スイッチ、つまみ、表示部の点検	6.2.1.1(18)	C	✓								
	線質フィルタの確認	6.2.1.1(19)	C	✓								
電気安全	X線管装置とX線可動絞リ取付ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
	絞リフランジ取付板固定ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
	接地の確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
	接地抵抗の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
清掃	外装漏れ電流の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
	装置及び操作ボックスの清掃	6.2.1.1(7)	CL	✓								
						特記事項	1は適用外				個数	
						天井走行破断検査動作確認						

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 岡山大学病院		岡山サービスセンタ 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾843 岡山県総合流通センタ - 内 TEL 086-292-6911 FAX 086-292-6925	
お客様ID 61158290000-143	受付番号 4980294	作業 EE	区分 2J
保証区分 有償		PJ番号 SR04980294	
装置名 MRAD-A80S/B5	設置室 41室	据付日 2017年2月28日	
ご依頼内容 スポット点検作業		作業内容 点検報告書に基づき、点検作業実施。 MRC04074	
受付日 2019年10月7日			
作業開始・終了時間			
開始	2019年10月10日17時30分		
終了	2019年10月10日19時45分		
時間内	時間外	往復	合計
0	3	1	4
完了			
ユニット DST-2000A/N2	製造番号 N2A1712031	作業担当者 今井、滝本 他0名	
使用部品			数量
1	以下余白	図番	
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

沼田

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意願います。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願いたします。

伝票番号 01116122

DST-2000A 点検報告書(一回目)(1/2)

SR No.

D. 御得意用(記録)

実施日 2019 年 10 月 10 日

御得意名	様	システム型式名	契約期間	年月日	点検者	結果
室名	41 X線撮影室	MRAD-A00N/R5 Ser No. RFA171303 制御装置名 EXQ-00SSAN7 Ser No. N7B172.065		年月日	今井 澤本	MRCO4074

御得意承認印

2019

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考
X線管支持装置	DST-2000A(2YG21-093JA)					天井レール	長手動コムストッパの確認	6.1.5.1(1)	C	√	
							長手動ローラ走行面の確認	6.1.5.1(2)	C	√	
							長手動ブレーキ板の確認	6.1.5.1(3)	C	√	
							ガイドローラの確認	6.1.5.1(4)	C	√	
							浮き止めローラの確認	6.1.5.1(5)	C	√	
							長手動用マグネットブレーキの点検	6.1.5.1(6)	C	√	
							横手動ローラ走行面の確認	6.1.5.1(7)	C	√	CL
							横手動ブレーキ板の確認	6.1.5.1(8)	C	√	"
							横手レールケーブリングハンガ(固定式)の確認	6.1.5.1(9)	C	√	
							横手レールケーブリングハンガ(可動式)の確認	6.1.5.1(10)	C	√	
本体部	外観					運動機能 (機能付の場合)	ガイドローラの点検	6.1.1.1(1)	C	√	
							横手動用マグネットブレーキの点検	6.1.1.1(2)	C	√	
							横手動コムストッパの確認	6.1.1.1(3)	C	√	
							懸垂用ワイヤロープの確認	6.1.1.1(5)	C	√	
							コーンブーリーの確認	6.1.1.1(6)	C	√	
							上下動用マグネットブレーキの確認	6.1.1.1(7)	C	√	
							ゼンマイばね断線検出器の動作確認	6.1.1.1(8)	C	√	
							懸垂メインワイヤ断線検出の確認	6.1.1.1(9)	C	√	
							断線検出の動作確認	6.1.1.1(10)	C	√	
							懸垂ワイヤブーリーの確認	6.1.1.1(11)	C	√	
支柱	等差ワイヤ断線検出器の点検					重要締結部	等差ワイヤ断線検出器の点検	6.1.1.1(12)	C	√	
	等差ワイヤ断線検出器の動作確認						等差ワイヤ断線検出器の動作確認	6.1.1.1(13)	C	√	
	支柱外観の確認						支柱外観の確認	6.1.2.1(1)	C	√	
	支柱ガタの確認						支柱ガタの確認	6.1.2.1(2)	C	√	
	支柱ワイヤロープの確認						支柱ワイヤロープの確認	6.1.2.1(3)	C	√	
	スライダ動作の確認						スライダ動作の確認	6.1.3.1(1)	C	√	
	Cリングの点検						Cリングの点検	6.1.3.1(2)	C	√	
	ケーブルホルダの点検						ケーブルホルダの点検	6.1.3.1(3)	C	√	
	ローテーション動作の点検						ローテーション動作の点検	6.1.3.1(4)	C	√	
	スライダ動作の点検						スライダ動作の点検	6.1.3.1(5)	C	√	
サポート部	ロッキングナットの点検					電気安全	ロッキングナットの点検	6.1.3.1(6)	C	√	
	ダクトラングの点検						ダクトラングの点検	6.1.3.1(7)	C	√	
	ローテーション動作の確認						ローテーション動作の確認	6.1.3.1(8)	C	√	
	SID測定スケールの点検						SID測定スケールの点検	6.1.4.1(1)	C	√	
	横手動ロック解除スイッチの確認						横手動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(2)	C	√	
	長手動ロック解除スイッチの確認						長手動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(3)	C	√	
	上下動ロック解除スイッチの確認						上下動ロック解除スイッチの確認	6.1.4.1(4)	C	√	
	ファンハンドオールリリーススイッチの確認						ファンハンドオールリリーススイッチの確認	6.1.4.1(5)	C	√	
	オールリリーススイッチの確認						オールリリーススイッチの確認	6.1.4.1(6)	C	√	
	ローテーション解除スイッチの確認						ローテーション解除スイッチの確認	6.1.4.1(7)	C	√	
操作BOX	スライダ(支柱軸)スイッチの点検					清掃	スライダ(支柱軸)スイッチの点検	6.1.4.1(8)	C	√	
	緊急停止スイッチの点検						緊急停止スイッチの点検	6.1.4.1(9)	C	√	
特記事項	1. 点検時					特記事項	1. 点検時				
	2. 点検時						2. 点検時				
	3. 点検時						3. 点検時				
	4. 点検時						4. 点検時				
	5. 点検時						5. 点検時				
	6. 点検時						6. 点検時				
	7. 点検時						7. 点検時				
	8. 点検時						8. 点検時				
	9. 点検時						9. 点検時				
	10. 点検時						10. 点検時				
個数	1. 点検時					個数	1. 点検時				
	2. 点検時						2. 点検時				
	3. 点検時						3. 点検時				
	4. 点検時						4. 点検時				
	5. 点検時						5. 点検時				
	6. 点検時						6. 点検時				
	7. 点検時						7. 点検時				
	8. 点検時						8. 点検時				
	9. 点検時						9. 点検時				
	10. 点検時						10. 点検時				

DST-2000A 点検報告書(一回目)(2/2)

御得意承認印

D. 御得意用(記録)

SR No.
実施日 2019 年 10 月 10 日

御得意名	岡山大学病院	様	システム型式名	MKAD-ARX/B5	契約期間	点検者	今井、亮本
室名	41 X線撮影室		Ser No.	B5A1712003	年 月 日	年 月 日	MRC04074
			制御装置名	KX0-XAS/N7	年 月 日	年 月 日	
			Ser No.	N7B1712005			

点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	点検箇所	点検項目	項目No.	方法	結果	備考	
X線可動絞り BLR-2000A(2Y621-093JA) 絞り	外観	6.2.1.1(1)	C	✓								
	絞り回転機構の点検	6.2.1.1(2)	※	✓								
	開度表示機構の点検	6.2.1.1(3)	C	✓								
	羽根開閉確認	6.2.1.1(4)	C	✓								
	開度表示とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(5)	C	✓								
	羽根タレ寸法の確認	6.2.1.1(6)	C	✓								
	ランプとソケットの確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
	ランプ点灯時間確認	6.2.1.1(8)	C	✓								
	ランプ照度確認	6.2.1.1(9)	C	✓								
	ランプ光照射野とX線照射野のズレ測定	6.2.1.1(10)	C	✓								
	照射野ランプの点検	6.2.1.1(11)	C	✓								
	フックキーライトの点検	6.2.1.1(12)	C	✓								
	感熱遮断器の点検	6.2.1.1(13)	C	✓								
	冷却ファンの動作確認	6.2.1.1(14)	C	✓								
	コネクタ接続の点検	6.2.1.1(15)	※	✓								
	ケーブル配線に点検	6.2.1.1(16)	※	✓								
重要締結部	内部配線材に点検	6.2.1.1(17)	※	✓								
	操作スイッチ、つまみ、表示部の点検	6.2.1.1(18)	C	✓								
	線質フィルタの確認	6.2.1.1(19)	C	✓								
	X線管装置とX線可動絞り取付ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
電気安全	絞りフランジ取付板固定ボルト	6.2.1.1(7)	※	✓								
	接地の確認	6.2.1.1(7)	※	✓								
	接地抵抗の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
	外装漏れ電流の測定	6.2.1.1(7)	※	✓								
清掃	装置及び操作ボックスの清掃	6.2.1.1(7)	CL	✓								
						特記事項	12.適用外				個数	
						放射線計測機						
						天井走行、上下動ハラス、ワイヤ-状態、						
						留断検出音確認						